

3SHAPE

GUIA RAPIDO
Desinstalação

2021






estará desse jeito



Desconectar o Scanner da base




Fazer a substituição da ponteira
de escaneamento para a
ponteira de proteção

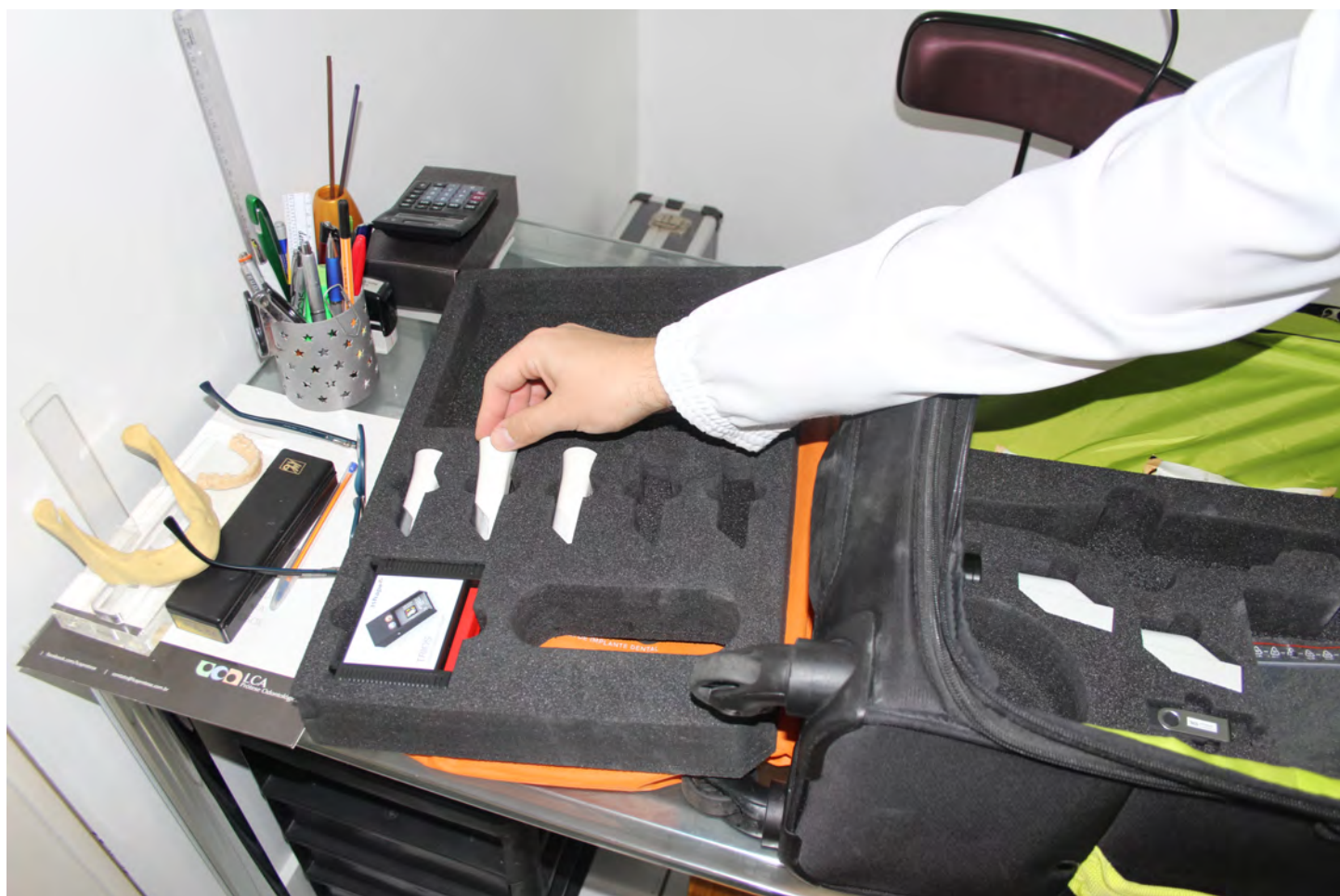

Guardar a ponteira de
escaneamento no seu devido
compartimento



pegar a capa de proteção

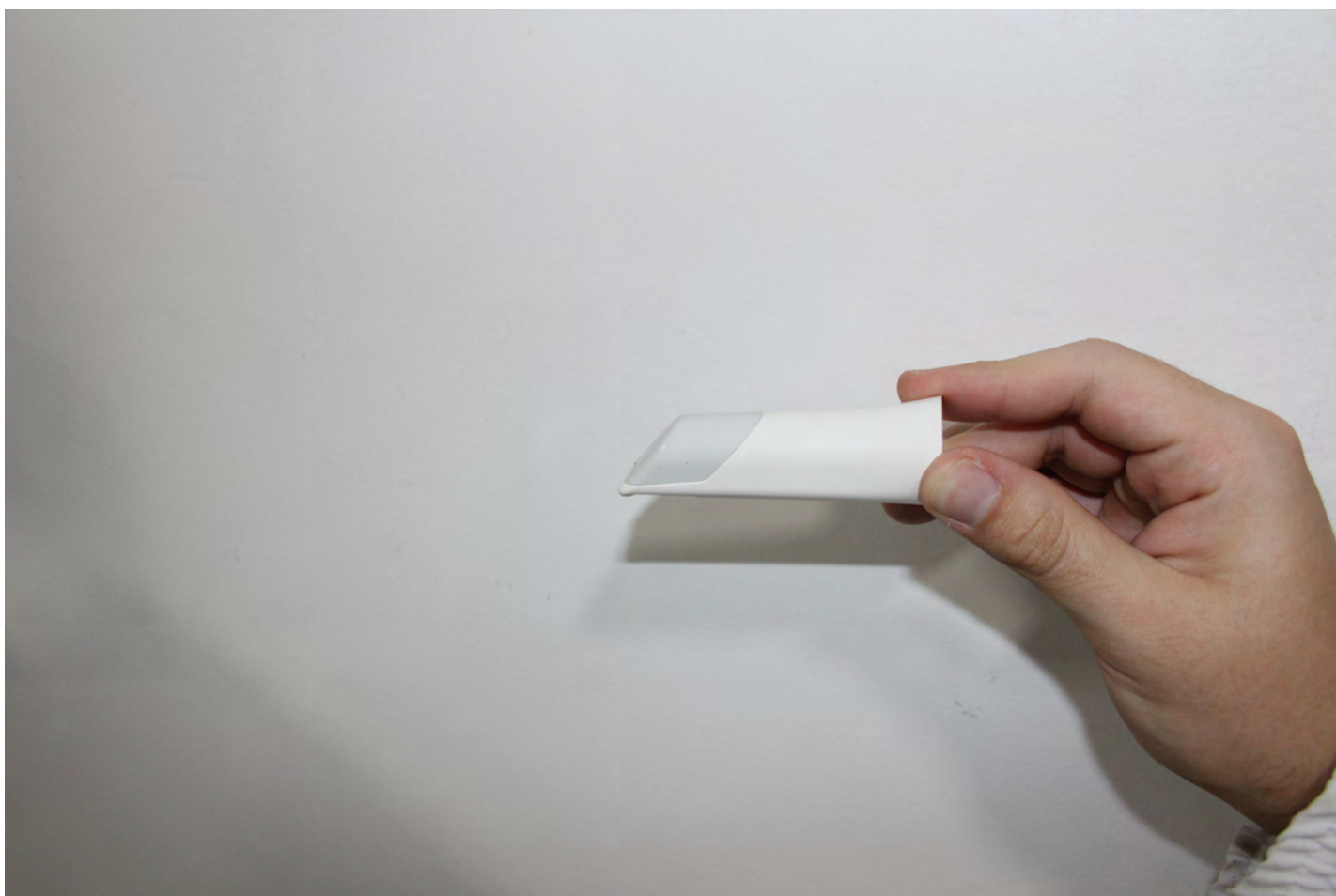

monstrando a capa de proteção



Encaixar a capa de proteção
na ponteira sem forçar
tem o encaixe correto



Guardar a ponteira no seu
devido compartimento



Enrolar o cabo no seu
devido compartimento



Desconectar o cabo de rede da base



Desconectar o cabo de força
da base



guardar a base no seu
devido compartimento



Desconectar o cabo de força
da fonte



Guardar a fonte no
seu devido compartimento



Desconectar o cabo de
rede do computador



Guardar o cabo de rede
no seu compartimento



enrolar o cabo de força do scanner
e guardar no seu
devido compartimento



guardar o cabo no seu
compartimento como
mostra a foto



Colocar o compartimento
superior novamente
no encaixe correto



Fechar o programa
TRIOS
e depois Remover a doungle



Pegar a proteção da doungle
nesse compartimento



Colocar a proteção na doungle



Guardar a dounge
no seu devido compartimento
como na foto acima



Desligar o computador



Desconectar o cabo do carregador
do computador



Desconectar o cabo de força
da fonte



Guardar fonte no seu
devido compartimento



Guardar cabo de força
no seu devido compartimento



Pegar Proteção interna do
computador dentro deste
compartimento



Colocar a proteção interna



Colocar o computador dentro do seu devido compartimento como mostra na imagem acima



O scanner esta
pronto para transporte!!

Se persistir a duvida segue tutorial
rapido em video abaixo:



Clique no ícone para abrir



**Clique nos ícones e nos
acompanhe nas redes sociais**



**Quer conhecer sobre nossas soluções em assessoria
técnica entre em contato conosco.**



OBRIGADO!